

**BEAUTY LUX
TECHNOLOGY**


aqoapro

GLO2FACIAL

L'Aqua Pro combine 7 technologies en un seul appareil pour vous permettre de proposer des traitements spécifiques NON-INVASIFS, adaptés à vos clients.

La Technique Aqua Pro

L'AquaPro, améliore et prévient de nombreux problèmes cutanés sur le visage et le corps, notamment les pores dilatés et les points noirs, la peau grasse et congestionnée, les petites ridules et les lignes d'expression, les anomalies de texture de la peau, les inégalités du teint de la peau, ainsi que le manque d'élasticité et de fermeté.

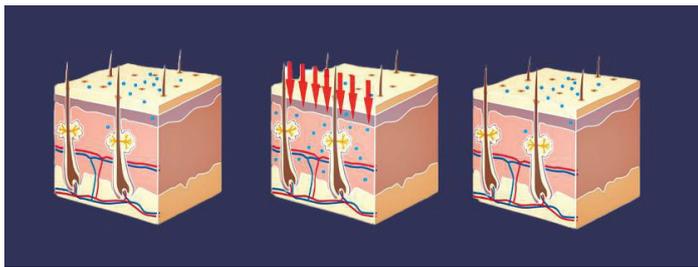

Raffermissment et Nutrition de la Peau



Nettoyage en Profondeur



Hydratation Profonde



Élimination de l'Acné et des Points Noirs



Soulagement de la sensibilité





Marteau Chaud et Froid + RF

Atteignez un raffermissement cutané, l'élimination des rides et une régénération cellulaire améliorée en utilisant la double action du chaud et du froid, associée à la technologie de Radiofréquence.

H2-O2, L'hydrodermabrasion

Combine le nettoyage, l'exfoliation, l'extraction et l'hydratation pour éliminer les impuretés et favoriser la pénétration de solutions actives dans la peau. Elle améliore ainsi la texture et la qualité de la peau.

Traitement à l'Oxygène

Le traitement facial à l'oxygène combine un jet d'oxygène hyperbare et une solution d'actifs pour exfolier en douceur, oxygéner les tissus, et améliorer la microcirculation cutanée, tout en permettant l'infusion de liquides spécifiques dans la couche cornée de la peau selon les besoins du client.

La Sonophorèse

Repose sur l'émission d'ultrasons pour rendre la peau perméable afin de délivrer des substances actives.

Le Scrubber

La pièce à main "scrubber" joue un rôle clé dans le processus d'exfoliation et de nettoyage en profondeur de la peau, contribuant ainsi à obtenir une peau plus nette et plus radieuse.

Bipolar HR (Heat Therapy)

Cette chaleur provoque une contraction des fibres de collagène existantes et stimule la production de nouveau collagène, ce qui peut aider à raffermir la peau, à réduire les rides et à améliorer la texture de la peau.

Bipolar EMS (Electrical Muscle Stimulation)

La stimulation électrique musculaire bipolaire est une technique qui utilise des courants électriques pour stimuler les muscles du corps. Elle lifte et raffermit les contours du visage, améliore les ridules et réduit les poches sous les yeux.



Nettoyage

Peau grasse

Peau avec les pores dilatés



Peau normale

Peau sensible

SPÉCIFICATIONS

TENSION	100-240V 50Hz-60Hz
POUVOIR	<60W
FLACON DE SÉRUM	Conception A.B.C.D
VIDE	24L
CONSEILS	10 types de conseils
PRESSION	200-400Kpa
AFFICHER	7 pouces
FRÉQUENCE RH	1-2 MHz
MARTEAU CHAUD ET FROID	Froid : 0-6°C / Chaud : 36°-46°C
FRÉQUENCE ULTRASONORE	1,1MHz
FRÉQUENCE DE LA PELLE	10-20KHz Microfréquence: 20-1000Hz

