

## L'HIFU (ULTRASONS FOCALISÉS DE HAUTE INTENSITÉ) POUR RAFFERMIR, AFFINER ET RAJEUNIR LES ZONES DU CORPS ET DU VISAGE

L'HIFU utilise l'énergie ultrasonique (émission d'une onde acoustique à travers les tissus en un point précis qui délivre, dans un temps de l'ordre de la milliseconde, une émission de chaleur supérieure à 65°). Les impacts vont agir sur chaque couche de la peau. Cette élévation de température permet, soit d'agir sur le collagène, soit sur les cellules graisseuses de l'hypoderme.

Les ultrasons peuvent s'effectuer sur tous les types (couleur) de peaux et à n'importe quelle période de l'année car il n'y a pas de compétition entre la mélanine (pigment responsable de la couleur de la peau) et les ondes acoustiques.


### Indications:

- ✓ Relâchement cutané modéré de l'ensemble du visage, au niveau des paupières et surtout l'ovale et pour atténuer un double menton et des bajoues avec l'objectif d'un «effet liftant» médical, sans chirurgie
- ✓ Relâchement cutané du cou et du décolleté
- ✓ Paupières tombantes, sourcils affaissés

Mais aussi :

- ✓ Excès de graisse au niveau du corps
- ✓ Relâchement cutané au niveau de l'abdomen, des hanches, des bras, des genoux...

Les résultats, déjà visibles à la sortie de la séance s'améliorent avec le temps car les cellules graisseuses sont définitivement détruites après plusieurs semaines et les fibroblastes stimulés ne réagissent qu'après 60 à 90 jours. L'effet liftant s'accroît donc de semaine en semaine. Il devient optimum au bout de trois mois et dure deux ans en moyenne.

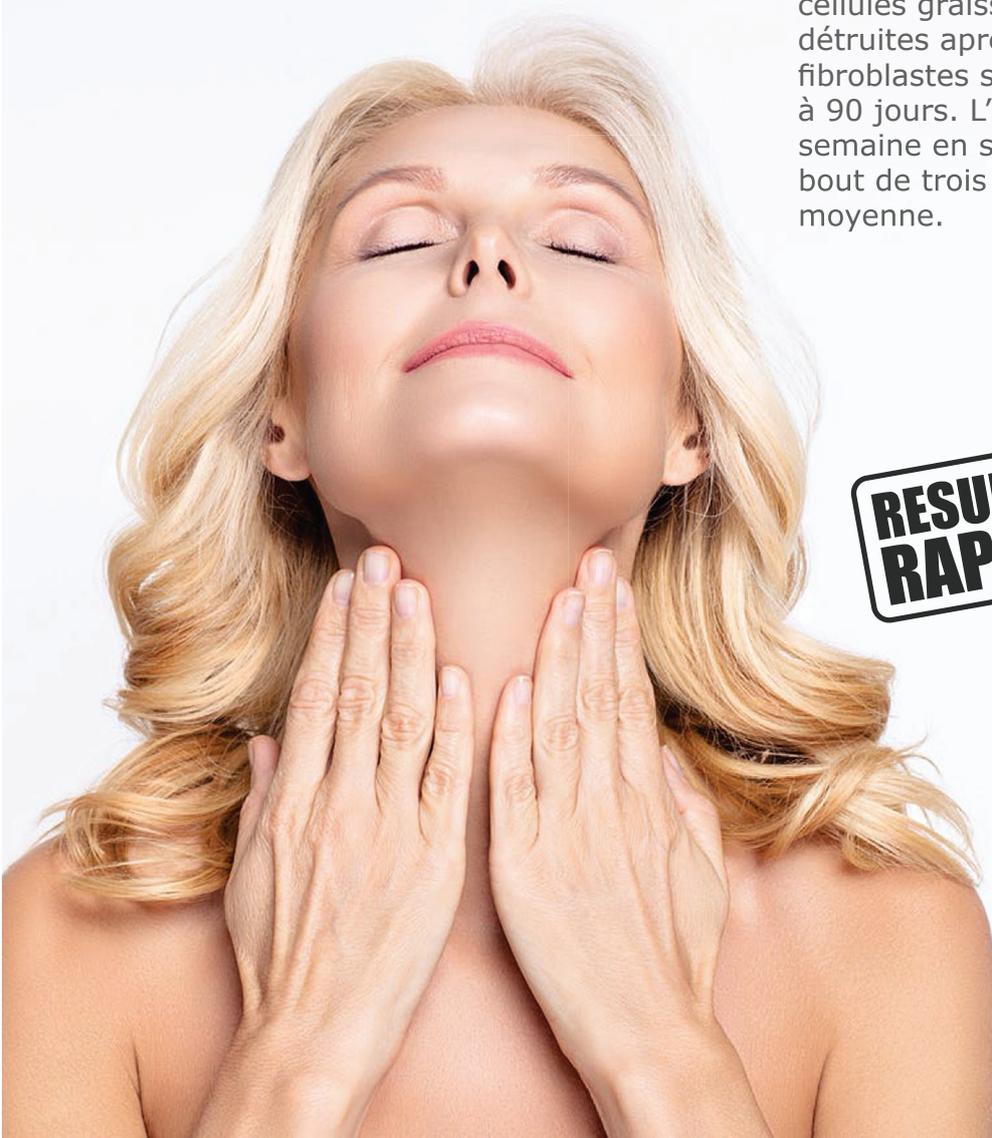


**RESULTATS  
RAPIDES**



TRIUMPH 2D permet de travailler à différentes profondeurs:

- ✓ 4,5 mm (muscles ou graisse (hypoderme) selon les zones)
- ✓ 3mm (derme moyen)
- ✓ 1,5 mm (derme superficiel)

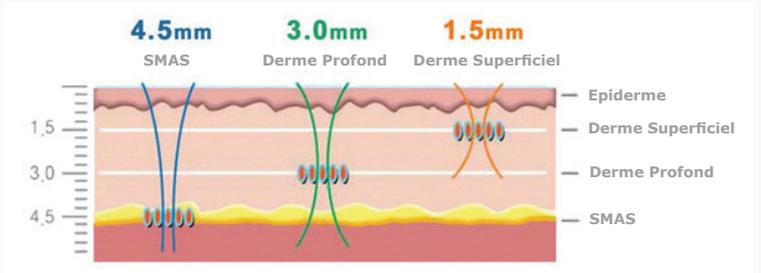


Modèle	Profondeur	Zones de traitement
DS4-1.5	1.5mm	· Visage complet · Cou
DS4-3.0	3.0mm	· Visage complet · Cou
DS4-4.5	4.5mm	· Visage complet · Cou
DS4-8.0	8.0mm	· Poitrine · Dos · Abdomen
DS4-13.0	13.0mm	· Abdomen · Jambes
DS4-16.0	16.0mm	· Abdomen · Jambes

**3 TÊTES DE TRAITEMENTS VISAGE: 1,5mm, 3mm et 4,5mm / 3 TÊTES DE TRAITEMENT CORPS: 0,8cm et 1.3cm**

## SPÉCIFICATIONS

TYPE	Ultrasons Focalisés à Haute Intensité
FRÉQUENCE	4MHz
PUISSANCE	200W
ÉNERGIE	0.1----2.0j
PROFONDEUR DU TRAITEMENT	1.5mm, 3.0mm, 4.5mm, 8.0mm, 13.0mm, 16.0mm (Optionnelle)
LONGUEUR DU TRAITEMENT	5----15/25mm
INTERVALLE DES CHOCS	1.0---3mm
SOURCE ÉLECTRIQUE	AC 110V~220V~50Hz/60Hz
DIMENSION DE LA MACHINE	48*38*95cm
DIMENSION DE L'EMBALLAGE	43*48*109cm
POIDS NET	20kg
POIDS BRUT	41kg



**BEAUTY LUX  
TECHNOLOGY**

+32 487 32 15 66  
 info@beautyluxtech.com  
<https://www.beautyluxtech.com>

<https://www.beautyluxtech.com>