

DÉTATOUAGE & RAJEUNISSEMENT CUTANÉ

Indications

La technologie laser picoseconde Emblem Platinum est conçue pour:

- ✓ Pour détatouer de manière sécurisée, rapide et efficace.
- ✓ Pour rajeunir et améliorer la peau avec des résultats rapides et sans éviction sociale. Le Carbon Peel est un peeling doux qui utilise le carbone comme vecteur mettant en évidence les impuretés et imperfections de la peau (pores obstrués ou dilatés, les taches, les ridules).

Avantages

- ✓ **Forte énergie et courte durée d'impulsions**
L'appareil émet de courtes impulsions lumineuses pour créer un intense impact photomécanique en picosecondes sur la zone tatouée. L'encre est pulvérisée en microparticules que le corps décompose plus facilement et elle est éliminée naturellement par l'organisme tout en préservant les tissus environnants.

✓ Rapide

Le détatouage traditionnel nécessite généralement 6 à 8 traitements. Avec un laser picoseconde, seuls 3 à 4 traitements sont nécessaires pour une élimination complète.

✓ Risque minime et douleur réduite

La durée des impulsions a été diminuée plusieurs milliers de fois, réduisant ainsi les dommages cutanés. Le traitement est plus sûr et moins douloureux. Il permet une cicatrisation rapide de la zone traitée.

✓ Haute performance

La technique « picoseconde » permet d'éliminer complètement les tatouages et les pigments. Elle enlève facilement les maquillages permanents des sourcils et des lèvres.


✓ Revitalise la peau

Cette technique stimule la production de collagène dont l'élastine, régule le sébum, améliore l'acné, resserre les pores, uniformise le teint et traite les taches pigmentaires.

✓ Cette technologie est adaptée pour les types de peaux I – IV

Sans post-traitement d'hyperpigmentation. Pas d'effets secondaires à craindre.



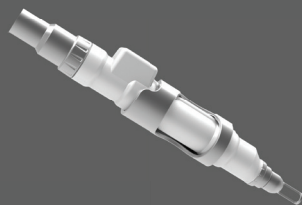


Tête de focalisation 1064 nm/532 nm (standard)

La machine peut générer deux longueurs d'onde en utilisant la même tête.



532nm Tête cellulaire

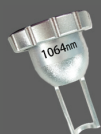

1064nm Tête cellulaire

532 nm: Cette longueur d'onde enlève les pigments superficiels autour de l'œil, les taches de naissance, les nævus d'Ota et de Meyerson. Il traite les lésions vasculaires et enlève les pigments de couleur rouge pour le détatouage.

1064 nm: Cette longueur d'onde enlève les pigments situés dans le derme de la peau, ceux de couleur bleu et noir. On l'utilise pour les traitements Carbon Peel.

SPÉCIFICATIONS

PUISSANCE	2000W
LONGUEUR D'ONDE DU LASER	1064nm, 532nm
SORTIE LASER	100- 800mj
LARGEUR D'IMPULSION	2000ps
ÉNERGIE	1600mj
FRÉQUENCE	1-20Hz réglable
TAILLE DU SPOT	Φ1-5mm
LUMIÈRE ROUGE DE GUIDAGE	650nm
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	Refroidissement par eau + refroidissement par semiconducteurs + refroidissement par air
PUISSANCE REQUISE	AC220V±10% 50Hz, AC110V±10% 60Hz
DIMENSIONS DE LA MACHINE	60*40*45cm
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE	86*56*59cm
POIDS NET	33kg
POIDS BRUT	51kg

